

# MEDLANCE®

Manipulation intuitive et activation simplifiée



## USAGE UNIQUE LANCETTES DE SÉCURITÉ STÉRILES

Conçu pour les prélèvements capillaires au bout des doigts

## Usage prévu du produit

Prévu pour une utilisation par des professionnels de la santé afin de prélever du sang capillaire au bout des doigts des patients afin d'effectuer divers tests sanguins, notamment des tests de glycémie.


## Caractéristiques du produit

### Activation simplifiée

Bouton-poussoir d'activation simple et intuitif facilitant l'utilisation

Zone de contact optimale pour un positionnement précis

Libération simplifiée de l'aiguille pour une pénétration fluide et délicate

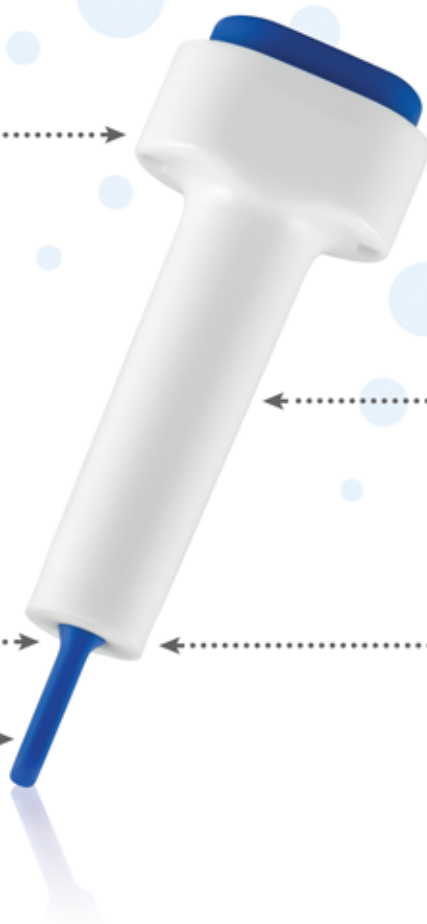

### Utilisation intuitive

Bouton-poussoir d'activation conçu pour une prise en main agréable

Corps en T pour la stabilité de prise en main

Dimensions idéales du corps

## Confiance et expérience éprouvées

- Ce produit fiable et de grande qualité aide à réduire ou éliminer les risques et autres coûts liés aux incidents de contamination croisée
- Reconnaissance mondiale

**Les blessures** par objets tranchants exposent les professionnels de la santé aux pathogènes transmis par le sang. Le centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC — Center for Disease Control) estime qu'environ 385 000 blessures par objets tranchants surviennent chaque année chez les professionnels de la santé hospitaliers.

Le CDC estime également qu'environ la moitié, voire plus, des blessures par objets tranchants demeurent non signalées. La majorité des blessures signalées concernent le personnel infirmier, mais les techniciens de laboratoire, les médecins, le personnel d'entretien, les étudiants en médecine et les autres professionnels de la santé y sont également exposés. Les blessures par objets tranchants surviennent avant, pendant et après l'utilisation d'objets tranchants et emeurent un grave risque pour la santé et la sécurité.

## Prévention des blessures par objets tranchants

**Il est possible de prévenir plus de 80 % des blessures par piqûre d'aiguille en utilisant des dispositifs à aiguille sûrs, qui, alliés à la formation des professionnels de santé et au contrôle des pratiques de travail, peuvent réduire les blessures de plus de 90 % ! \***


HTL-STREFA s'engage à fabriquer des produits de sécurité visant à réduire, voire éliminer, le risque d'exposition à des pathogènes sanguins.

Les lancettes de sécurité, y compris les lancettes **Medlance**<sup>®</sup>, constituent une partie intégrante des programmes de prévention des blessures par objets tranchants dans les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires, les cabinets de médecin et partout où les patients et les professionnels de santé doivent se sentir en sécurité.


**En utilisant des lancettes de sécurité, il est possible d'éliminer les blessures par piqûre d'aiguille et les infections associées.**

*Estimations de l'Organisation mondiale de la santé*

### Comment utiliser Medlance:

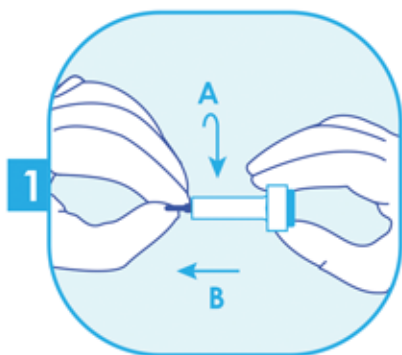

1  
Tourner le capuchon de protection et tirer dessus pour le retirer.

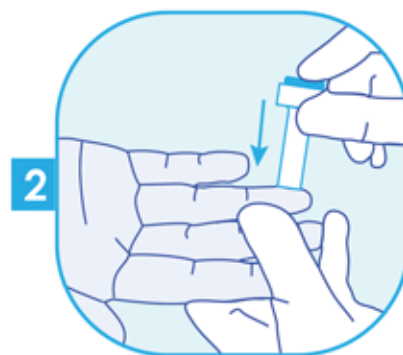

2  
Placer le corps du dispositif **Medlance**<sup>®</sup> contre le site de pénétration et appuyer sur le bouton pour l'activer.

Les lancettes de sécurité stériles à usage unique **Medlance**® s'activent par un simple bouton et permettent de pénétrer la peau des doigts pour obtenir des micro-prélèvements de sang capillaire.

## Disponibles en six versions:

Version du produit (calibre de l'aiguille/lame)	Profondeur de pénétration	Recommandations
 <b>Medlance</b> ® Needle 23 G	1.8 mm	pour peau sensible
 <b>Medlance</b> ® Needle 21 G	1.8 mm	pour peau sensible à normale
 <b>Medlance</b> ® Needle 21 G	2.4 mm	pour peau normale
 <b>Medlance</b> ® Blade 1.5 mm	1.0 mm	pour peau normale
 <b>Medlance</b> ® Blade 1.5 mm	1.5 mm	pour peau normale à épaisse
 <b>Medlance</b> ® Blade 1.5 mm	2.0 mm	pour peau épaisse

### Sources

Directions for safety lancets development based on nurses' needs; Poland, June 2016  
<https://www.osha.gov/needlesticks/needlefaq.html>

### Pologne



HTL-STREFA S.A.  
ul. Adamówek 7  
95-035 Ozorków  
info@htl-strefa.pl  
www.htl-strefa.com



Retrouvez-nous sur Facebook  
[www.facebook.com/HTLSTREFA](http://www.facebook.com/HTLSTREFA)

### USA

HTL-STREFA, Inc.  
3005 Chastain Meadows Pkwy  
Suite 300  
Marietta, GA 30066  
+1 770 528 0410  
info@htl-strefa.com  
www.htl-strefa.com



CE 0344

545-549/FR/05/2017  
Fabriqué en Pologne